


Manuale di istruzioni per:

Male Edge Basic, Male Edge Extra e Male Edge Pro



Per iniziare

Male Edge è spedito già montato. Lo riceverai in una comoda e sicura custodia.

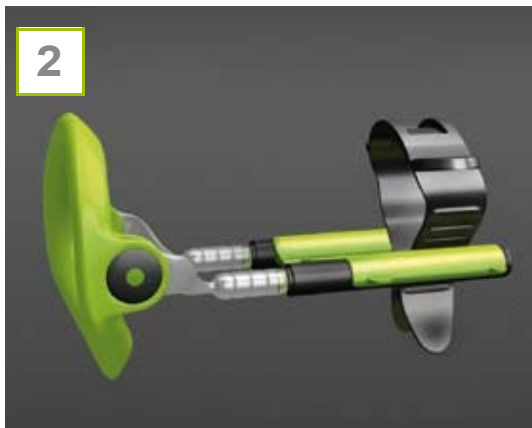


Controlla le tue dimensioni

Se il tuo pene a riposo misura più di 12,5cm, ruota la cinghia di gomma di 180°. Se misura meno di 12,5cm, invece, puoi lasciare il pezzo anteriore nella sua posizione originale.

3

Indossa l'estensore

Separa il pezzo anteriore dalle aste dell'estensore. Inserisci il pene all'interno dell'anello e posiziona il ring alla base del pene.

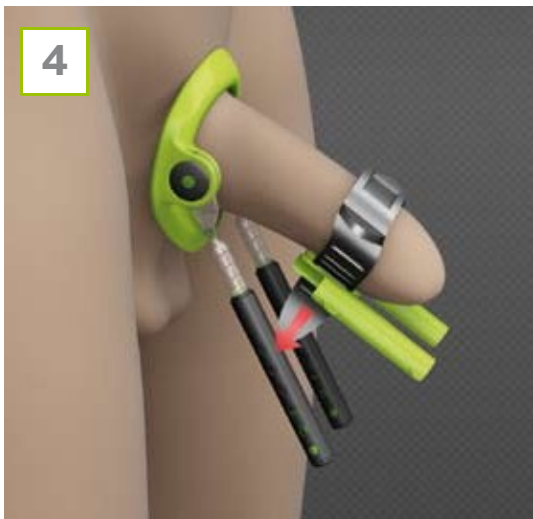4

Regola il cinturino in gomma

Posiziona e stringi il cinturino sotto il glande per una perfetta vestibilità. Per gli uomini non circumcisi il cinturino può essere posizionato o sopra il prepuzio o sotto, a seconda di come ci si sente più comodi.

5



Regola la lunghezza delle aste

Ruota le aste in senso orario per un quarto di giro e allungale fino alla lunghezza desiderata.

6



Fissa la lunghezza delle aste

Una volta raggiunta la lunghezza desiderata, ruota le aste in senso antiorario per bloccarle, fino a quando non sentirai un doppio click.

7



Non allungare troppo le aste


Assicurati di non allungare troppo le aste. Se dovessero uscire dai binari ti basterà premere le due punte e inserirle nuovamente nelle aste.

8




Incastra le aste di estensione alla parte anteriore

Quando avrai allungato le aste fino alla posizione desiderata, spingile delicatamente verso il tuo corpo. Fissa saldamente il pezzo anteriore sulle aste di allungamento incastrandoli. Saranno fissati quando sentirai “click”.

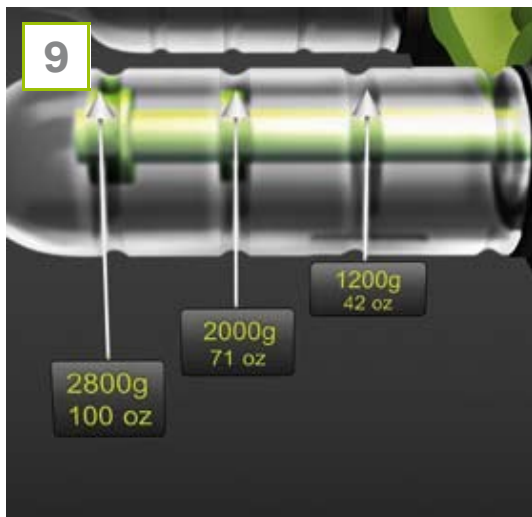

Calcola la trazione

Leggi la quantità di trazione riportata sugli indicatori dei cilindri trasparenti alla base del dispositivo.

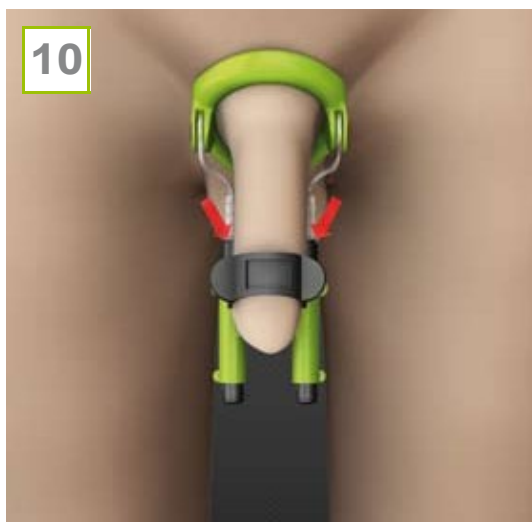

Aumenta la trazione

Per aumentare la trazione, sposta le aste di allungamento in avanti spingendole delicatamente con i pollici fino al “click”. Fai attenzione a non estendere le aste oltre l’ultimo foro per evitare che si stacchino.

11 Programma di trazione consigliato

settimana	trazione	ora/giorno
1	8-1200g / 28-42oz	1
2	8-1200g / 28-42oz	2
3	1200g / 42oz	3
4	1200g / 42oz	4
5	1200-2000g / 42-71oz	5
6	1200-2000g / 42-71oz	6

12 Uso e manutenzione

Male Edge è leggero e flessibile e si può posizionare verso giù o verso sù. Potrai indossare il tuo estensore per pene durante il giorno, sotto i pantaloncini o sotto pantaloni comodi, o durante la notte, come ti è più comodo.

Male Edge combina alta qualità con una manutenzione minima: il dispositivo infatti può essere lavato in lavastoviglie, basterà assicurarsi di aver separato il frontale e le aste di allungamento prima della pulizia.
